



For who you are & what you need...  
Pour vous et vos besoins...  
Para ustedes y lo que necesitan...

# FUSION<sup>TM</sup> MC

## 2 in 1 dans 1



**EN** **SIDE-FOLDING ROLLATOR & TRANSPORT CHAIR**

For proper assembly and to ensure your safety, follow these instructions.

**FR** **FAUTEUIL DE TRANSPORT ET AMBULATEUR À PLIAGE LATÉRAL**

Afin d'assurer un assemblage convenable ainsi que pour votre sécurité, suivez ces instructions attentivement.

**E** **ANDADOR Y SILLA DE TRANSPORTE LATERALMENTE PLEGABLE**

Para un montaje seguro y correcto, siga las instrucciones siguientes.



**PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO THE STORE.**

**S'IL VOUS PLAÎT, NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT AU MAGASIN.**

**POR FAVOR NO RETORNE ESTE PRODUCTO AL COMERCIO**

If you're experiencing problems or have a question, contact our customer service team at CAN: 866-752-1363 USA: 866-694-5085.

We're pleased to help you!


Si vous avez des difficultés ou si vous avez des questions, contactez-nous d'abord au CAN: 866-752-1363 EU: 866-694-5085. Nous serons heureux de vous offrir tout le support nécessaire!

Si un problema se llegara a presentar con el producto, por favor contáctenos al :CAN: 866-752-1363 EU: 866-694-5085, será un placer de poder ayudarle ofreciéndole todo el soporte que sea necesario.



**PARTS GUIDE**  
**COMPOSANTES**  
**LOS COMPONENTES**

EN	FR	E	
A. Handgrip	A. Poignées	A. Asideros	
B. Brake handle	B. Freins à main	B. Palanca del freno	
C. Hand screw	C. Vis à main	C. Tornillo de mano	
D. Folding strap	D. Courroie de pliage	D. Correa plegable	
E. Seat support	E. Support du siège	E. Apoyo del asiento	
F. Brake cable guide	F. Guide du câble de frein	F. Guía del cable de freno	
G. Reversible backrest	G. Appui-dos réversible	G. Respaldo reversible	
H. Backrest screw	H. Vis de l'appui-dos	H. Tornillo del respaldo	
I. Handlebar	I. Tige de poignée	I. Manillar	
J. Armrests	J. Appui-bras	J. Apoya brazos	
K. Brake cables	K. Câbles de freins	K. Cables del freno	
L. Seat	L. Siège	L. Asiento	
M. Removable basket	M. Panier amovible	M. Cesta extraíble	
N. Footrests	N. Repose-pieds	N. Reposapiés	
O. Front wheels	O. Roues avant	O. Ruedas delanteras	
P. Brake adjustment knob	P. Bouton d'ajustement du frein	P. Perilla de ajuste de frenos	
Q. Rear wheels	Q. Roues arrière	Q. Ruedas traseras	
R. Safety lock	R. Verrou de sécurité	R. Cierre de seguridad	
S. Folding clip	S. Verrou de pliage	S. Cierre de pliegue	
T. Curb climber	T. Monte-trottoir	T. Subbordillos	

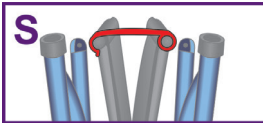


REGISTER YOUR FUSION™ ONLINE	ENREGISTREZ VOTRE FUSION <sup>MC</sup> EN LIGNE	REGISTRE EN LÍNEA SU FUSION™
<p><b>EN</b></p> <p>Please register your Airgo® online at <a href="http://airgomobility.com">airgomobility.com</a> to activate your warranty and stay up to date with the latest notices.</p>	<p><b>FR</b></p> <p>Veuillez enregistrer en ligne votre Airgo® au <a href="http://airgomobility.com">airgomobility.com</a> pour activer votre garantie et obtenir les informations les plus à jour.</p>	<p><b>E</b></p> <p>Por favor registre su Airgo® en línea en el sitio : <a href="http://airgomobility.com">airgomobility.com</a> afín de activar su garantía y obtener las informaciones más recientes.</p>

**1** **CHECK ALL PARTS**  
**VÉRIFIEZ TOUTES LES PIÈCES**  
**VERIFIQUE TODAS LAS PIEZAS**



## 2

### UNFOLD THE ROLLATOR FRAME DÉPLIEZ LE CHÂSSIS DE L'AMBULATEUR DESPLEGAR EL MARCO DE LA SILLA DE RUEDAS

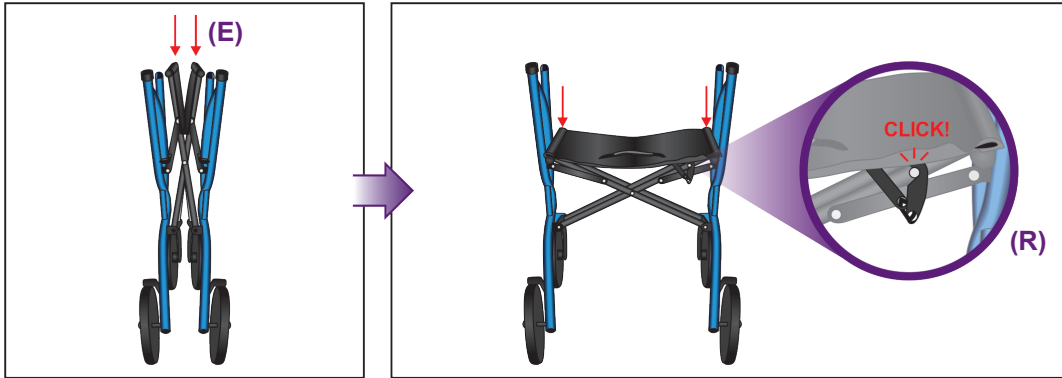

EN

Place the frame standing upright on level ground. Push down on the Seat Supports (E) to expand and open the frame. You will hear the Safety Lock (R) click into place when the frame is fully unfolded.

FR


Déposez le châssis à l'endroit sur le sol. Appuyez sur les supports du siège (E) pour ouvrir le châssis. Lorsque le châssis est entièrement déplié, le verrou de sécurité (R) se mettra en place avec un « clic ».

E

Coloque el marco en posición vertical sobre un suelo nivelado. Empuje hacia abajo en los soportes de asiento (E) para extender y abrir el marco. Cuando el marco esté completamente desplegado, usted oír el clic del cierre de seguridad (R) cuando encaje en su lugar.

## 3

### INSERT THE HANDLEBARS INSÉREZ LES TIGES DE POIGNÉES INSTALACIÓN DE LAS RUEDAS DELANTERAS

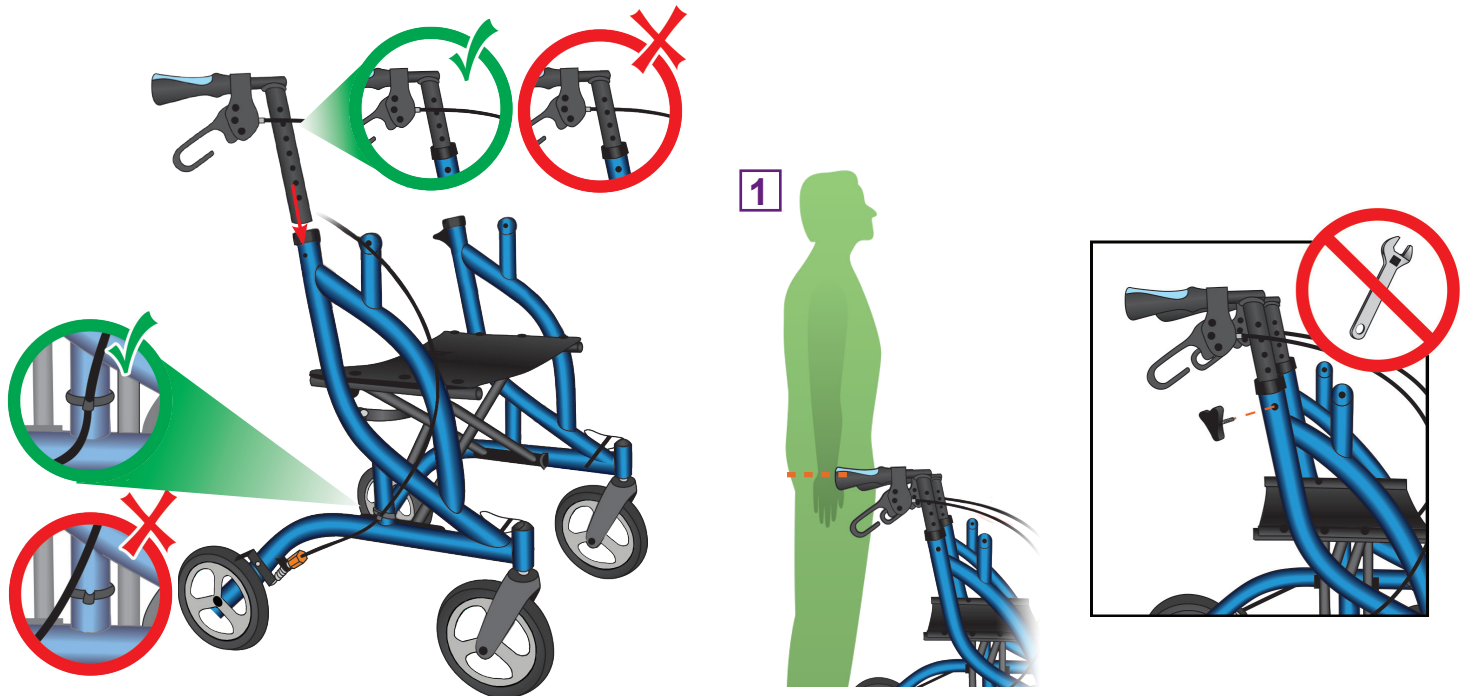

EN

Ensure the brake cables are on the outside of the frame, and that they pass through the cable guide. For height adjustment, stand upright and set the handgrips even with your wrists (1). Hand tighten the triangular hand screws.

FR


Assurez-vous que les câbles des freins sont à l'extérieur du châssis et qu'ils passent par le guide prévu à cet effet. Pour ajuster la hauteur, tenez-vous debout et ajuster les poignées à hauteur de vos poignets (1). Vissez à la main les vis triangulaires.

E

Asegúrese que los cables de freno están fuera del chasis y que pasan a través del guía. Para ajustar la altura, póngase de pie y ajústelos a la altura de sus puños (1). Aseguran los tornillos triangulares con la mano.

# 4

## INSTALL THE FOOTRESTS INSTALLEZ LES REPOSE-PIEDS INSTALACIÓN DEL REPOSAPIÉS

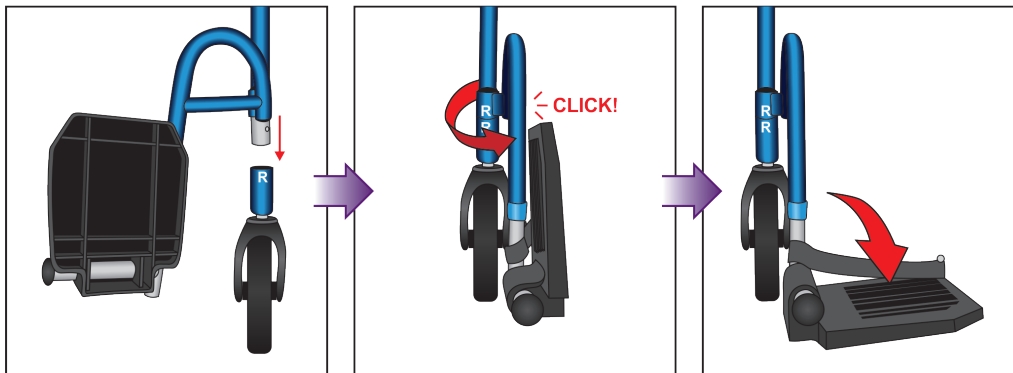

EN

Match the letters on the frame (*L and R*) to the same letters on the footrests. Press the push-buttons on the footrest tubing and insert into the Fusion's frame. The footrests can be locked in two different positions (front, for transport chair use, and side, for rollator use). To rotate the footrests, press the push-button and rotate.

When not in use, the footrests can be conveniently stored by pushing the push-button and swinging them to the side of the frame where another push-button will hold them securely in place. This allows you to lift and store your Fusion safely. The footrests can also be removed when not in use.

TIP: the black cap on the footrest tubing can be removed and used to cover the open tubing where the footrests slot into.

FR

Tout en appuyant sur les boutons-poussoirs, insérez les repose-pieds dans la tubulure du châssis dont la lettre correspond (*L et R*). Les repose-pieds peuvent être verrouillés dans deux positions différentes : vers l'avant, pour la fonction fauteuil de transport, et vers l'arrière, pour la fonction ambulateur. Pour changer la position des repose-pieds, appuyez sur les boutons-poussoirs à l'intérieur du châssis et pivotez les repose-pieds.

Quand ils ne sont pas utilisés, les repose-pieds peuvent être pivotés sur le côté de l'ambulateur puis verrouillés en place grâce à des boutons-poussoirs. Cela vous permettra de soulever et de ranger votre Fusion de manière sécuritaire. Ils peuvent aussi être retirés lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

N.B. : le capuchon noir sur la tubulure du repose-pied peut être retiré et utilisé pour boucher le trou du châssis où le repose-pied est normalement inséré.

E


Pulse los botones a presión de los tubos de los reposapiés (*L y R*), e insértelos en los orificios correspondientes (*L y R*) del marco del Fusion. El reposapiés puede bloquearse en dos posiciones diferentes (frontal, para utilizar como silla de transporte, y de lado, para el uso como andador). Para girar el reposapiés, presione el botón y hágalo girar.

Cuando no se usan, los reposapiés pueden guardarse convenientemente pulsando el botón y moviéndolos a un lado del marco, donde otro botón los sujetará firmemente en su lugar. Esto le permite levantar y guardar su Fusion con toda seguridad. Los reposapiés pueden desmontarse cuando no se utilicen.

SUGERENCIA: el capuchón negro en el tubo de reposapiés puede quitarse y ser utilizado para cubrir el tubo abierto donde normalmente se inserta el reposapiés.

# 5

## INSTALL THE BACKREST & THE BASKET INSTALLEZ LE DOSSIER ET LE PANIER INSTALE EL RESPALDO Y LA CESTA

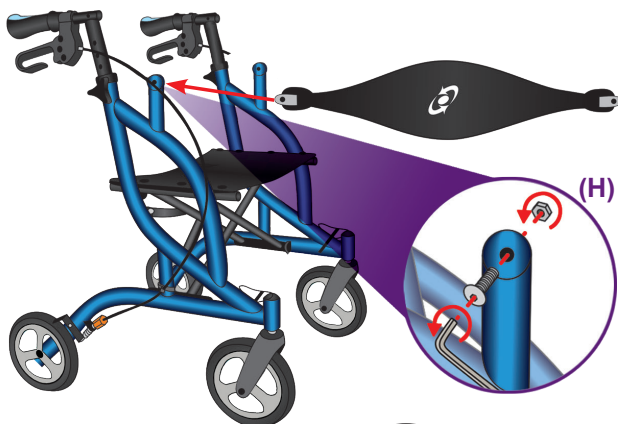

EN

Insert the backrest so that the Fusion logo faces the front wheels. Slide one end of the backrest into the fan bracket. Insert the backrest screw (H) from the inside of the unit out, and repeat. Install the basket by sliding it onto the mounts starting from the back, and then pulling to the front.

FR


Installez le dossier de manière à ce que le logo Fusion soit placé vers les roues avant. Insérez une extrémité de l'appui-dos dans la fente prévue à cet effet. Insérez de l'intérieur vers l'extérieur une vis pour appui-dos (H), et répétez l'opération de l'autre côté. Installez le panier souple en glissant d'abord l'arrière du panier sur les tiges fixées sur le châssis, puis tirez-le vers l'avant.

E

Instale el respaldo de manera que el logo Fusion se coloca de lado de las ruedas delanteras. Deslice un extremo del respaldo en la abertura prevista. Inserte del interior hacia el exterior el tornillo del respaldo (H) y repítelo del otro lado. Instale la canasta deslizando el lado trasero en los montajes y después tirando hacia delante.

# 6


## FOLDING YOUR FUSION POUR PLIER VOTRE FUSION PLEGAR EL FUSION

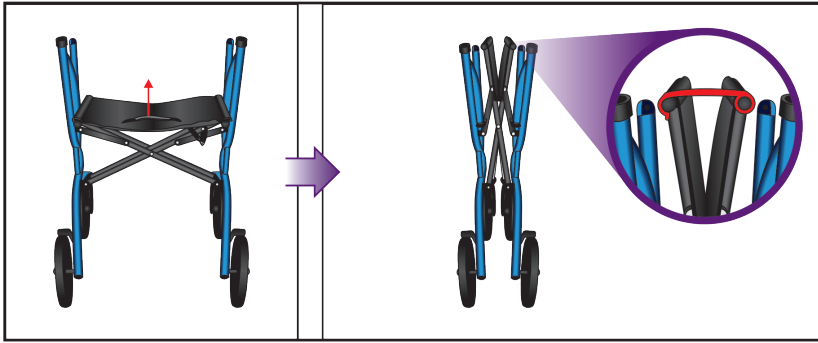

- EN** Pull the folding strap on the seat to release the safety lock and initiate folding. Use the folding clip to lock the rollator in the folded position.
- FR** Tirez sur la courroie de pliage, située sur le siège, afin de déverrouiller le mécanisme de pliage. Utilisez le verrou de pliage pour tenir l'ambulateur plié.
- E** Tire la correa localizada en el asiento para desbloquear el mecanismo de plegue. Para mantener el andador plegado utilice el seguro.

# 7

## USING THE BRAKE HANDLES UTILISER LES POIGNÉES DE FREIN CÓMO UTILIZAR LOS FRENOS DE MANO

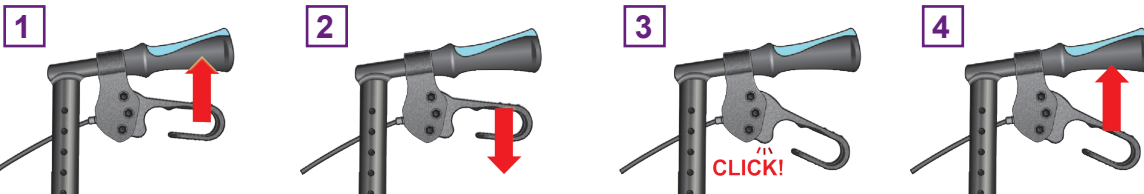


- EN** Squeeze up to slow down (1). To lock, push down until they click (2-3). To release, pull back up (4). ALWAYS lock the brakes before using the seat.
- FR** Serrez-les pour freiner (1). Pour les verrouiller, appuyez dessus jusqu'à ce qu'elles émettent un « click » (2-3). Pour les déverrouiller, serrez-les à nouveau (4). Verrouillez TOUJOURS les freins avant d'utiliser le siège.
- E** Para frenar deben presionar las empuñaduras (1). Para asegurarlos presione sobre ellas hasta que escuche un click (2-3) para quitar el seguro presiónelos de nuevo (4). Ponga SIEMPRE el seguro a los frenos ANTES de utilizar el asiento.

### PERIODIC BRAKE ADJUSTMENT

### AJUSTEMENT PONCTUEL DES FREINS



### AJUSTE PERIÓDICO DE LOS FRENOS

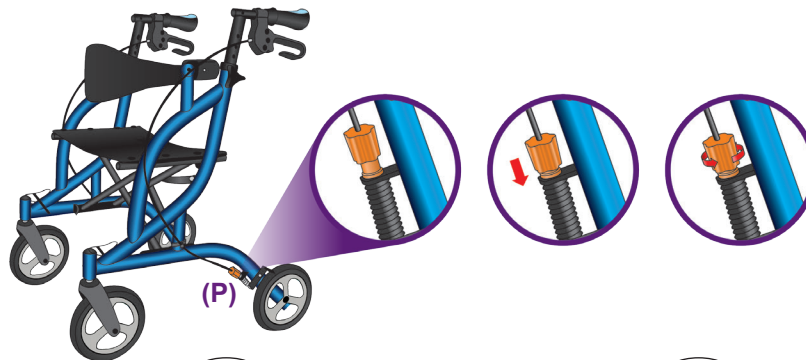

- EN** To adjust the brakes, simply push down the orange Brake Adjustment Knob (P) and rotate. Rotating the adjustment knob clockwise will loosen the brakes while rotating it counter-clockwise will tighten them.  
  
IMPORTANT – Before using your Fusion again, ensure the brakes are working properly. DO NOT use if it moves while the brakes are in the locked position. If you are unsure of how to adjust your brakes please see your authorized Airgo dealer or call our toll-free number CAN: 866-752-1363 USA: 866-694-5085 for help.
- FR** Pour ajuster les freins, appuyez simplement sur le bouton d'ajustement du frein (P) et tournez-le. Le tourner dans le sens horaire diminuera la pression du frein, et en sens antihoraire augmentera la pression du frein.  
  
IMPORTANT – Avant d'utiliser le Fusion de nouveau, assurez-vous que les freins fonctionnent correctement. Si les roues arrière bougent alors que les freins sont engagés, N'UTILISEZ PAS le Fusion. Si vous éprouvez de l'incertitude quand à l'ajustement des freins ou si vous désirez de l'aide, communiquez avec votre détaillant autorisé Airgo ou appelez-nous sans frais au CAN: 866-752-1363 USA: 866-694-5085.
- E** Para ajustar el freno, simplemente empuje hacia abajo la perilla de ajuste de freno de color naranja (P) y gírela. Hacia la derecha para aflojar los frenos y hacia la izquierda para apretarlos.  
  
IMPORTANTE - Antes de utilizar la Fusión otra vez, asegúrese de que los frenos estén funcionando correctamente. No la utilice si se mueve mientras que los frenos estén en la posición de bloqueo. Si no está seguro de cómo ajustar los frenos, consulte su distribuidor autorizado Airgo o llame a nuestro número gratuito CAN: 866-752-1363 USA: 866-694-5085 para obtener ayuda.

# 8

## ROLLATOR & TRANSPORT CHAIR MODE FONCTION AMBULATEUR & FAUTEUIL DE TRANSPORT ANDADOR & SILLA DE TRANSPORTE MODALIDAD

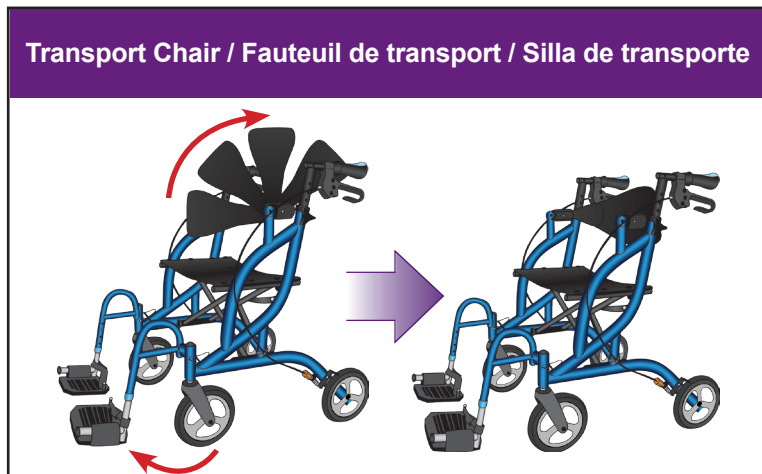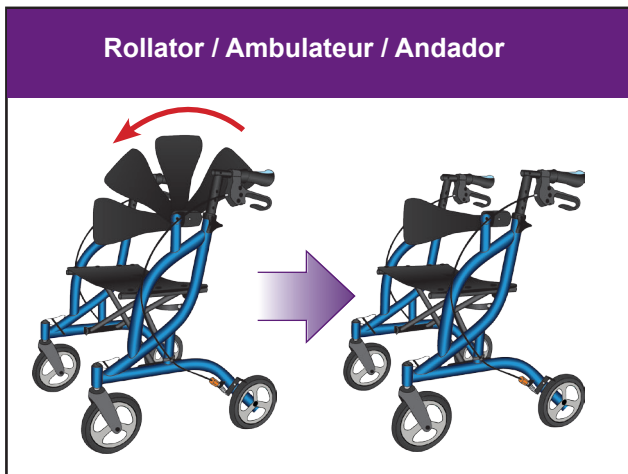

EN

### ROLLATOR MODE

Flip the backrest away from the handlebars so that it is positioned towards the front wheels. Before entering or exiting the seat always ensure the brakes are in the locked position by pushing down on both brake handles until you hear them click.

### TRANSPORT CHAIR MODE

Flip the backrest toward the handlebars so that it is positioned to the back of the Fusion. Then, for each footrest, press on the push-buttons above the front wheel and rotate the footplate toward the front of the Fusion until it locks into place. before entering or exiting the seat, always ensure that the footrest plates are folded up and that the brakes are locked. Once the user is seated, deploy the footrest plates as illustrated. Their height can be adjusted using the push-buttons on their tubing.

FR

### FONCTION AMBULATEUR

Pivotez l'appui-dos du côté opposé aux tiges de poignées, afin qu'il soit positionné en direction des roues avant. Avant de vous asseoir sur le siège ou de vous relever, engagez toujours les deux freins à main en les abaissant jusqu'à ce qu'un « clic » se fasse entendre.

### FONCTION FAUTEUIL DE TRANSPORT

Pivotez l'appui-dos vers les poignées pour qu'il soit dirigé vers l'arrière de l'ambulateur. Ensuite, ramenez chaque repose-pieds vers le centre de l'ambulateur. Un bouton-poussoir se verrouillera lorsqu'un repose-pied est bien en place. Verrouillez toujours les freins et remontez les plaques de repose-pieds avant de vous lever ou de vous asseoir sur le siège de l'ambulateur. Quand l'utilisateur est bien installé dans le siège, déployez les plaques de repose-pieds comme illustré. Leur hauteur peut être ajustée grâce aux boutons-poussoirs sur leur tubulure.


E

### MODALIDAD ANDADOR

De la vuelta al respaldo alejándolo del manillar, de modo que se sitúe hacia las ruedas delanteras. Antes de entrar o salir de la silla, asegúrese siempre de que los frenos estén en la posición de bloqueo, presionando hacia abajo las dos manijas de freno hasta que les oiga hacer clic.

### MODALIDAD SILLA DE TRANSPORTE

Vuelva el respaldo hacia los asideros, de manera que quede hacia la parte posterior de la Fusión. Luego, traiga cada reposapiés hacia el frente de la silla, y pulse en los botones a presión encima de la rueda delantera, y gire la placa reposapiés hacia el frente de la Fusión hasta que encaje en su lugar. Antes de entrar o salir del asiento, asegúrese siempre de que las placas reposapiés estén plegadas y de que los frenos estén bloqueados. Una vez que el usuario esté sentado, despliegue las placas reposapiés como se ilustra. La altura se puede ajustar usando los botones a presión del tubo.

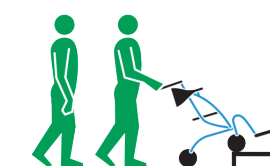

EN

### CAUTION WHEN SEATED

Leaning out of the Fusion without proper assistance could cause tipping. To reduce the risk of an accident, NEVER reach or lean when you are seated in your Fusion. Instead, have someone present to help you.

### CAUTION WHEN PUSHING

When pushing someone in the Fusion, do not roll across small uneven surfaces. Doing so can cause the unit to tip forward. To safely cross curbs, uneven surfaces or use on large inclines, the person sitting on the Fusion must get out of the seat.

FR

### ATTENTION : LORSQUE VOUS ÊTES ASSIS

Vous pencher sans l'aide appropriée peut faire basculer le Fusion. Afin de réduire les risques d'accidents, NE TENTEZ PAS de vous pencher ou d'atteindre un objet alors que vous êtes assis : demandez plutôt de l'aide.

### ATTENTION : LORSQUE VOUS Poussez LE FUSION

Lorsque vous poussez le Fusion, ne roulez pas sur des reliefs ou dans une pente – cela pourrait le faire basculer. Si la pente ou l'obstacle est trop élevée (ou pour atteindre un trottoir), la personne assise doit se lever et franchir l'obstacle à pied.

E

### PRECAUCIÓN CUANDO ESTÉ SENTADO

Inclinarse hacia fuera de la Fusión sin la ayuda adecuada puede causar un vuelco. Para reducir el riesgo de accidente, cuando esté usted sentado en su Fusión, NUNCA intente alcanzar algo o inclinarse. Pida siempre ayuda.

### PRECAUCIÓN AL EMPUJAR

Al empujar a alguien en la Fusión, no pasen a través de superficies irregulares, lo que podría hacer que la unidad volcara. Para cruzar con seguridad bordillos, superficies irregulares o para usarla en pendientes pronunciadas, el usuario deberá levantarse del asiento.



## WALKING TIPS CONSEILS DE MARCHÉ CONSEJOS DE MARCHÉ

EN

1. Imagine a line drawn between the rear wheels. Part of one foot should be ahead that line as you walk.
2. Perform simple stretches before walking. This will help you walk further and avoid injury.
3. Bring a bottle of water to stay hydrated.
4. Walk on soft ground that is more joint-friendly, such as grass or dirt paths.
5. Use the curb climber to help safely lift your rollator over obstacles, such as sidewalks.

FR

1. Imaginez qu'une ligne est dessinée entre les roues arrière. Une partie de votre pied doit dépasser cette ligne lorsque vous marchez.
2. Avant de marcher, prenez le temps d'effectuer quelques étirements simples. Cela vous permettra de marcher plus loin et réduira les risques de blessures.
3. Emportez une bouteille d'eau avec vous afin de rester bien hydraté.
4. Marchez sur une surface plus douce, comme du gazon ou de la terre battue, qui sont plus confortables pour les articulations.
5. Utilisez le monte-trottoir pour faire passer de manière sécuritaire votre ambulateur par-dessus les obstacles, comme les trottoirs.

E

1. Imagine una línea trazada entre la ruedas traseras. Una parte de su pie debe estar delante de esa línea.
2. Antes de caminar, con su andador tome el tiempo para hacer un poco de estiramientos sencillos. Esta rutina simple le permitirá de caminar mas lejos y reducirá los riesgos de lesiones.
3. Tenga una botella de agua siempre consigo para estar bien hidratado.
4. Camine sobre superficies mas suaves, como césped o tierra aplanada o otros materiales que son mas confortables para las articulaciones.
5. Utilice la subbordillos para dirigir su andador de manera segura por cima de obstáculos, como los aceras.

## READ THESE PRECAUTIONS PRIOR TO USING

## LIRE CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ AVANT UTILISATION

## LEA ESTAS PRECAUCIONES ANTES DE USAR

EN

1. Consult your doctor, therapist or other qualified professional to determine if this mobility aid will suit your particular needs.
2. Before each use, make sure that all parts are secure and that the frame is fully opened.
3. Risk of fall and serious injury may result if brakes are not locked while the user attempts to sit down.
4. Do not navigate independently while seated. Do not attempt to sit on the seat while on an incline. Do not lean when you are seated. Doing so may cause the walker to tip and a serious risk of injury may result.
5. Falls are possible if you use the seat without installing the backrest.
6. Do not use your rollator while folded. The stability of any rollator is compromised when its frame is folded, increasing the likelihood of a fall.
7. **Do not exceed the following weight limit or serious injury could result:**  
**Rollator Mode: 300 lb**  
**Transport Chair Mode: 300 lb**

FR

1. Consultez votre médecin, thérapeute ou un autre professionnel qualifié afin de déterminer si ce produit convient à vos besoins.
2. Avant chaque utilisation, vérifiez que toutes les pièces sont bien fixées et que le châssis de votre ambulateur est complètement ouvert.
3. Des risques de chutes ou des blessures sérieuses sont possibles si les freins ne sont pas verrouillés lorsque vous vous assoyez dans le siège.
4. N'utilisez pas cet ambulateur pour vous déplacer pendant que vous êtes assis dans le siège. N'essayez pas de vous assoir lorsque vous êtes sur un plan incliné. Ne vous penchez pas lorsque vous êtes assis. Cela pourrait faire basculer l'ambulateur et causer des blessures sérieuses.
5. Vous risquez de tomber si vous utilisez le siège sans avoir installé le dossier.
6. Ne pas utiliser l'ambulateur lorsqu'il est plié. La stabilité de n'importe quelle aide à la mobilité est compromise lorsque le châssis est plié.
7. **Ne pas excéder les limites de poids suivantes, afin d'éviter les risques de blessures sérieuses :**  
**Mode ambulateur : 136 kg (300 lb)**  
**Mode fauteuil de transport : 136 kg (300 lb)**

E

1. Consulte su medico, terapeuta u otro profesional de la salud que puede determinar si el producto es el adecuado para usted.
2. Antes de cada utilización, verifique que todas las piezas estén en su lugar y que el chasis de su andador este completamente abierto.
3. Cuidado, puede haber riesgo de caídas o de lesiones graves si los frenos no están asegurados al momento de sentarse en el andador.
4. No utilice el andador para desplazarse cuando usted este sentado en el. No se incline cuando usted está sentado. Esto podría desequilibrar el andador causando graves lesiones.
5. Puede caerse si usted utiliza el asiento sin haber instalado el respaldo.
6. No utilice el andador cuando este plegado. La estabilidad de cualquier tipo de aparato de ayuda a la movilidad se ve comprometida cuando se pliega el marco.
7. **No exceda el límite de peso o podrían producirse lesiones graves:**  
**Modalidad andador: 300 libras**  
**Modalidad Silla de Transporte: 300 libras.**



## LIMITED LIFETIME WARRANTY GARANTIE LIMITÉE À VIE GARANTÍA A VIDA LIMITADA

EN

Drive Medical covers this Airgo® rollator by a Lifetime Warranty on the Frame and a Five (5) Year Warranty on Brake Handles against defects in materials and workmanship. All other parts and components are warranted for a period of 90 days. This warranty is valid for the original purchaser only. Any alterations, abuse, misuse or accidental damage voids this warranty. Drive Medical reserves the right to replace or repair any part that has become defective.

For warranty service and general inquiries in Canada and the U.S., call our customer service team at **CAN: 866-752-1363 USA: 866-694-5085**. Provide the following information when you call: date of purchase, receipt and serial number (on crossbar underneath the seat). Our Customer Service Team will provide you with a return authorization number as well as all necessary shipping instructions. Note that with your return you will be required to include a copy of the original bill of sale.

FR

Drive Medical garantit à vie le châssis de cet ambulateur contre les défauts de fabrication et de matériaux; les poignées de freins pour une durée de cinq ans ; et toutes les autres pièces pour 90 jours. Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur du produit neuf. Toute altération, abus, usage impropre ou dommage accidentel annule cette garantie. Drive Médical se réserve le droit de remplacer ou réparer toute pièce défectueuse.

Pour le service, ou pour toutes questions au Canada et aux États-Unis, contactez notre service à la clientèle au **CAN: 866-752-1363 ÉU : 866-694-5085**. Fournissez les renseignements suivants lors de votre appel : la date d'achat, le reçu et le numéro de série (situé sur la tige sous le siège). Notre équipe de service à la clientèle vous fournira un numéro de retour ainsi que tous les détails d'expédition. Notez qu'une copie de la facture originale doit accompagner tout retour de marchandise.

E

Drive Medical cubre el andador Airgo® con una garantía a vida limitada para el armazón y cinco (5) años de garantía para las agarraderas del freno, contra defectos de materiales y mano de obra. Todas las otras piezas y componentes están garantizadas por un período de 90 días. Esta garantía es válida solamente para el comprador original. Cualquier abuso o alteración, uso erróneo o daño accidental anulará esta garantía. Drive Medical se reserva el derecho de reemplazar o reparar cualquier pieza que resulte defectuosa.

Para el servicio de garantía y para dudas en Canadá y en los Estados Unidos, se contacta nuestro servicio a la clientela **CAN: 866-752-1363 EU: 866-694-5085**.

Cuando usted llame comuníquese las informaciones siguientes: fecha de compra, recibo y número de serie (se encuentre en la barra debajo del asiento). Nuestro equipo de servicio le proporcionará un número de autorización de retorno e instrucción de expedición necesario. Tenga en cuenta que con su retorno se debe incluir una copia de la factura original de venta.



## AIRGO® RECOMMENDS AIRGO® VOUS RECOMMANDE AIRGO® LE RECOMIENDA



### Cup Holder

- A refreshment holder for your Airgo, to stay hydrated wherever you go!
- Swivels from left to right for maximum convenience.

### Porte-goblet

- Vous permet de transporter votre boisson sur votre Airgo, pour rester hydraté où que vous alliez !
- Pivote de gauche à droite pour un maximum de confort.

### Porta bótelas

- Le permite de llevar su bebida en su Airgo, se mantenerse hidratado, donde sea.
- Gira de izquierda a derecha para la máxima comodidad.



### Cane Holder

- Allows you to conveniently store your cane on your rollator.
- Easy to use, simply strap your cane along with you.

### Porte-canne

- Vous permet de transporter votre canne sur votre ambulateur.
- Facile à utiliser, attachez simplement votre canne pour l'emmener avec vous.

### Soporte de bastón

- Le permite de llevar su bastón en su andador.
- Fácil a utilizar, simplemente amare su bastón y lleva donde sea.

Distributed by / Distribué par  
Drive Medical Canada  
256 Aviva Park Drive  
Vaughan, Ontario Canada L4L 9C7  
www.drivemedical.com  
USA: 866-694-5085  
CAN: 866-752-1363  
**www.airgomobility.com**



EU Authorized Representative  
Représentant autorisé dans la Communauté européenne  
Drive Medical LTD  
Ainley's Industrial Estate  
Elland, West Yorkshire,  
United Kingdom HX5 9JP  
Made in China / Fabriqué en Chine